

ERGEBNISSE

Außergewöhnliche Ergebnisse*

Haarentfernung – CLARITY™ II




Quelle: Bilder von Kubiley Yucel, MD

Aktive Akne – SOLARI™



Quelle: Bilder von GS Lee, MD

Stimulation Haarwachstum – LaseMD™

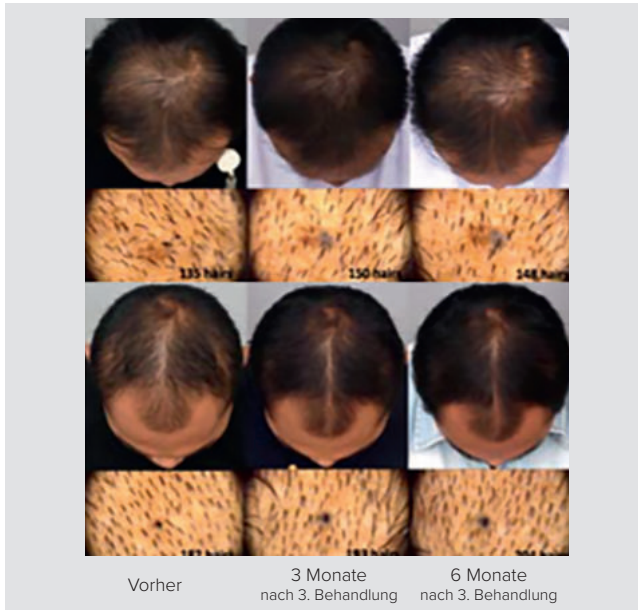

Quelle: Chula Med J. Vol.63 No.1 (2019)

TECHNISCHE DATEN

CLARITY™ II

Technologie	Langgepulster Alexandrit- & Nd:YAG-Laser
Wellenlänge	755 nm & 1064 nm
Pulslänge	0,1 ms – 300 ms
Energie	Max. 100 J beim Nd:YAG, Max. 60 J beim Alexandrit. Max. Fluenz: 600 J/cm ²
Frequenz	0,5 – 10 Hz

SOLARI™

Technologie	Intense Pulsed Light
Wellenlänge	420 nm bis 950 nm
Pulslänge	5 ~ 300 ms
Energie	35 J/cm ²
Frequenz	max. 1 Hz

LaseMD™

Technologie	Thulium-Laser mit Cosmeceutical Delivery System
Wellenlänge	1927 nm
Energie	1 – 20 mJ
Leistung	1 – 5 W

Sie haben Interesse? Sprechen Sie uns an.

Erfahren Sie mehr:
www.lutronic-laser.de

Lutronic Medical Systems Germany GmbH
Esplanade 41, 20354 Hamburg, Deutschland
TEL: +49 40 6963 999-50 / FAX: +49 40 6963 999-59
E-MAIL: germany@lutronic.com

©2021 LUTRONIC. Alle Rechte vorbehalten. LUTRONIC, Lutronic Intelligent Care, LaseMD™, SOLARI™, CLARITY™ II und verbundene Logos sind Dienstleistungsmarken, Marken und/oder eingetragene Marken der Lutronic Corp. und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

* Die gezeigten Behandlungsergebnisse sind beispielhaft und können variieren.

LUTRONIC
Intelligent Care™

CLARITY™ II SOLARI™ | LaseMD™



**Haarentfernung & Stimulation von
Haarwachstum mittels Laser & IPL**

ANWENDUNGSGEBIETE



CLARITY™ II

- Dauerhafte Haarentfernung
- Hautverjüngung, Hautstraffung und -festigung
- Gesichts-Teleangiectasien
- Epidermale pigmentierte Läsionen
- Rosazea
- Große Poren, Mitesser
- Beinvenen
- Warzen
- Onychomykose



SOLARI™

- Dauerhafte Haarentfernung
- Vaskuläre Läsionen
- Melasma
- Vergrößerte Poren
- Hautverjüngung
- Epidermale pigmentierte Läsionen
- Dermale pigmentierte Läsionen
- Rosazea
- Teleangiectasien
- Lentigo Solaris



LaseMD™

- Stimulation des Haarwachstums bei androgenetischer Alopezie
- Hautverjüngung – insbesondere Gesicht, Hals & Dekolleté
- Anti-Aging
- Hautaufhellung, Depigmentierung
- Epidermale Melasmen
- Narben

WIRKUNGSWEISE

CLARITY™ II

CLARITY™ II ist ein leistungsstarker **Alexandrit- und Nd:YAG-Laser** zur Haarentfernung, Pigment- und Gefäß-Behandlung. Die IntelliTrak™-Technologie gewährleistet eine gleichbleibend schnelle Energieversorgung bei der gewählten Behandlungsdichte ohne Fehlstellen, egal wie schnell Sie über die Haut gleiten. Die Temperaturmessung bietet Echtzeit-Feedback, um die Wirksamkeit und die Sicherheit der Behandlung zu maximieren.

SOLARI™

SOLARI™ ist ein **IPL-System**, das sich von allen anderen durch seine Spitzentechnologie unterscheidet: Seine Rechteckimpulstechnik sorgt dafür, dass über den gesamten Behandlungsbereich hinweg homogenes Licht geliefert wird, ohne dass es zu Hotspots und Hitzestaus mit entsprechenden Nebenwirkungen kommt. Zudem bietet das System eine für IPL extrem schnelle Wiederholungsrate

LaseMD™

LaseMD™ ist ein **nonablativer Thulium-Laser**, der präzise Mikrokanäle in der Haut erzeugt, in die eigens für diese Behandlung entwickelte Kosmezeutika für verschiedene Aspekte der Verjüngung und Regeneration eingebracht werden können:

- VC-Serum mit Ascorbinsäure
- VA-Serum mit Retinol
- TA-Serum mit Tranexamsäure
- RS-Serum mit Resveratrol



LaseMD™ – AMPULLEN

Jede Ampulle enthält ein Minimum an Inhaltsstoffen. So können Ärzte sowohl das Behandlungsergebnis als auch mögliche Nebenwirkungen besser unter Kontrolle halten.

VORTEILE

CLARITY™ II

- IntelliTrak™-Technologie gewährleistet eine gleichbleibend schnelle Energieversorgung und Behandlungsdichte – unabhängig von der Behandlungsgeschwindigkeit
- Temperatur-Sensing: Echtzeit-Rückmeldung zur Überwachung der Hauttemperatur
- Intelligentes Rollhandstück mit Cryogen-Kühlung oder Luftkühlung, das sich selbst nach jeder Parameteränderung kalibriert
- LED-Beleuchtung an Konsole und Handstück informiert den Benutzer über die optimale Rollgeschwindigkeit
- Auswahl zwischen 755 nm und 1064 nm Wellenlänge
- Bis zu 45% schnellere Behandlungen mit Spotgrößen von bis zu 25 mm

SOLARI™

- Spitzentechnologie Rechteckimpulstechnik: Sehr stabile, flache und homogene Ausgabe über den gesamten Impuls für eine Behandlung ohne Hotspots und ohne Nebenwirkungen
- SOLARI™ weist im Vergleich zu anderen IPLs eine sehr schnelle Wiederholungsrate auf, die Zeit spart und eine schnellere Behandlung ermöglicht
- Hochselektive Cut-off-Filter für eine effiziente gezielte Behandlung von Chromophoren
- Das preisgekrönte Hautkühlsystem SOLARI™ hält die Kühltemperatur des Kontaktpunkts aufrecht, um eine komfortable und sichere Behandlung zu gewährleisten

LaseMD™

- Schonende Anti-Aging Behandlung – auch wirksam bei Haarausfall
- Intuitives Roll-Handstück gewährleistet regelmäßige Impulsabgabe unabhängig von Behandlungsgeschwindigkeit
- Auswahl aus verschiedenen Kosmezeutika für individuelle Behandlungen
- Schnell sichtbare und nachhaltige Verjüngungs-Resultate durch Aufbau von Kollagen und Elastin
- Nachbehandlungskonzept für direkt nach der Behandlung und für zuhause