

ERGEBNISSE

Außergewöhnliche Ergebnisse

Hautverjüngung LaseMD




Photos Courtesy of W. LoVerme, MD

Hautstraffung GENIUS



Courtesy of S. Weiner, MD

Hautverjüngung eCO2 Plus

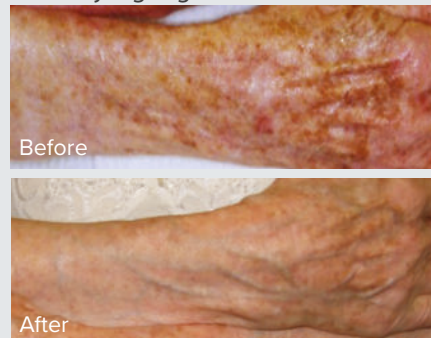

Courtesy of M G Rubin, MD, USA

TECHNISCHE DATEN

LaseMD™

| | |
|-------------|---|
| Technologie | Thulium-Laser mit Cosmeceutical Delivery System |
| Wellenlänge | 1927 nm |
| Energie | 1 - 20 mJ |
| Leistung | 1 - 5 W |

GENIUS®

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Technologie | Radiofrequenz Microneedlingsystem |
| Pulslänge | 10 - 1000 ms |
| Energie | 2 - 100 mJ |
| Leistung | max.50 W |
| Frequenz | 460 kHz |

eCO2Plus™

| | |
|-------------|-----------------|
| Technologie | CO2 |
| Pulslänge | 40 - 5000 µs CW |
| Energie | 2 - 240 mJ |
| Leistung | max. 30 W |
| Frequenz | 10 -200 Hz |

Sie haben Interesse? Sprechen Sie uns an.

Erfahren Sie mehr:
www.lutronic-laser.de

LUTRONIC
Intelligent Care™

Lutronic Medical Systems Germany GmbH
Esplanade 41, 20354 Hamburg, DEUTSCHLAND
TEL: +49 40 6963 999-50 / FAX: +49 40 6963 999-59
E-MAIL: germany@lutronic.com

LUTRONIC
Intelligent Care™

GENIUS® - LaseMD™ - eCO2™



Hautverjüngung, Straffung,
Voluminisierung, u.v.m.
Drei effektive Behandlungsmethoden im direkten Vergleich

*Die Ergebnisse sind beispielhaft und können variieren.

ANWENDUNGSGEBIETE

LaseMD™

- Hautverjüngung – insb. Gesicht & Hals & Dekolleté
- Anti-Aging
- Hautaufhellung
- Depigmentierung
- Epidermale Melasmen
- Narben
- Alopezie (androgenetischer Haarausfall)



GENIUS®

- Hautstraffung und Voluminisierung
- Lidstraffung
- Hautverjüngung
- Aknenarben, Narben
- Hyperhidrose
- Hyperpigmentierung
- Striae



eCO2 Plus™

- Hautverjüngung
- Elastosen
- Narben
- Dyschromie
- Muttermale
- Warzen
- Leukodermie
- Syringome
- Striae
- Seborrhhoische Keratosen
- Transepidermale Arzneimittelabgabe
- Hartnäckige Weißfleckenkrankheit



WIRKUNGSWEISE

Thulium-Laser & Cosmeceutical Delivery System

LaseMD ist ein nonablativer Thulium-Laser, der präzise Mikrokanäle in der Haut erzeugt, in die eigens für diese Behandlung entwickelte Kosmezeutika für verschiedene Aspekte der Hautverjüngung eingebracht werden können:

- VC-Serum mit Ascorbinsäure
- VA-Serum mit Retinol
- TA-Serum mit Tranexamsäure
- RS-Serum mit Resveratrol



LaseMD - Ampullen
Jede Ampulle enthält ein Minimum an Inhaltsstoffen. So können Ärzte sowohl das Behandlungsergebnis als auch mögliche Nebenwirkungen besser unter Kontrolle halten

Punktgenaue Koagulation

Das GENIUS RF-Microneedling-System sorgt mittels intelligenter Radiofrequenz für herausragende Resultate bei der Hautstraffung, Voluminisierung und (Akne-)Narbenrevision. Zudem kann das System zur Behandlung von Hyperhidrose eingesetzt werden. Verschiedene Nadelaufsätze ermöglichen die komfortable Behandlung von kleinen und großen Arealen.



4 Variable Aufsätze
Genius Tip: 10 x 10 mm
Genius Large Tip: 20 x 20 mm
GeniEye Tip: 14 Mikronadeln (Anordnung 2 x 7)
GeniScar Tip: 16 Mikronadeln (Anordnung 4 x 4)

TotalSkin Solution = GENIUS & LaseMD

Die Kombi-Behandlung wirkt intensiv in der Tiefe als auch in oberen Hautschichten und ist daher besonders effektiv.

Von ultra-tiefer bis oberflächlicher Abtragung

Der eCO2 Plus von Lutronic ist ein fraktionaler und ablativer CO2-Laser, welcher Ihnen das volle Spektrum der Verjüngungsbehandlung für Ihre Praxis bietet. Das System kann u. a. für chirurgische inzisions- und exzidier-Behandlungen bis hin zu vollständig ablativen Behandlungen zur Hauterneuerung eingesetzt werden.

VORTEILE

LaseMD™

- Schonende Anti-Aging Behandlung
- Intuitives Roll-Handstück gewährleistet regelmäßige Impulsabgabe unabhängig von Behandlungsgeschwindigkeit
- Auswahl aus verschiedenen Kosmezeutika für individuelle Behandlungen
- Schnell sichtbare und nachhaltige Resultate durch Aufbau von Kollagen und Elastin
- Nachbehandlungskonzept für direkt nach der Behandlung und für zuhause

GENIUS®

- Schaffung präziser Koagulationszonen in variabler Tiefe
- Patentiertes Handstück mit Aufsätzen verschiedener Größe ermöglicht eine schnelle, saubere und präzise Nadeleinbringung sowohl in großen als auch kleinen Arealen
- Impedanz-Messung mit Echtzeit Feedback über tatsächlich gelieferte Energie
- Algorithmus für eine maximal sichere Energieversorgung
- Nachhaltige Behandlungsergebnisse durch Aufbau von Kollagen und Elastin

eCO2Plus™

- Patentierte Controlled Chaos Technology (CCTM) senkt Risiko von Nebenwirkungen und sorgt für einen schnelleren Heilungsprozess
- 0,2 mm-1,0 mm-Zoom-Handstück für chirurgische inzisions- und exzidier-Behandlungen bis hin zu vollständig ablativer Hauterneuerung
- Volle Kontrolle über Behandlungsdichte für bessere Ergebnisse in nur einem Behandlungsdurchgang
- Zwei Energiezuführmodi (dynamisch und statisch) für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Keine Verbrauchsmaterialien, dadurch geringere Betriebskosten und höherer Ertrag